

Invacare® | **Bora**

NOVITÀ



Invacare® **Module**

COMPATIBILE
matrix



Ovunque con te

Compatta, smontabile, trasportabile: sono solo alcuni degli elementi che si aggiungono alle già note caratteristiche delle carrozzine elettroniche Invacare, come maneggevolezza, sicurezza, modularità della seduta e grandi prestazioni di guida. Fatevi trascinare dall'impeto di **Invacare Bora**.



Yes, you can.®



Telaio completamente smontabile

Grazie ad un semplice meccanismo di sblocco si può separare il modulo seduta dalla base motrice della carrozzina. Le batterie si estraggono scorrendo su apposite guide, un unico cavo elettrico connette il comando alla centralina. In caso di interventi di manutenzione le componenti elettriche/elettroniche sono facilmente raggiungibili.

Grandi prestazioni

Invacare **Bora** è dotata di un sofisticato sistema di sospensioni a molla, che garantisce un'ottima stabilità e il massimo confort di guida sia all'interno che all'esterno. Sono disponibili potenti e scattanti motori nelle versioni da 6 o 10 km/h. Per l'uso esterno è previsto il sistema fari e frecce.

Compatta e manovrabile

Nel caso di utilizzo in passaggi angusti, si può optare per ruote anteriori più strette con forcelle ridotte in larghezza. In questo caso la larghezza totale della

base motrice si riduce a 590 mm: ideale per l'uso interno/esterno o in ambienti domestici e istituzionali dove gli spazi di manovra o passaggio sono ridotti.

Caratteristiche e optional



Rimozione modulo seduta

E' facilissimo: tirare il cordone posteriore, ribaltare in avanti il sedile, staccare il cavo elettrico e infine sollevare il modulo seduta.



Rimozione delle batterie

Le batterie sono alloggiare in 2 box separati che scorrono su un binario facilitando enormemente l'operazione di estrazione. Le connessioni tra le batterie sono ad aggancio/sgancio automatico.



Larghezza ridotta

La larghezza della base motrice montando le ruote anteriori più strette è di 590 mm.



Portabagagli posteriore

Utile, comodo e facile da montare, permette di trasportare i vostri oggetti personali.

Caratteristiche e optional



Lifter e basculamento elettrici (optional)

Elevazione della seduta di 300 mm con basculamento seduta fino a 30° gestita dal comando.

Sedute Invacare Modulite™



- ① Seduta **Modulite™** con base fissa da 430 mm, allargabile con braccioli, e profondità regolabile in continuo da 410 a 510 mm.
- ② Seduta **Modulite™** telescopica con base rigida composta da tre pezzi regolabili in larghezza e in profondità.
- ③ Seduta **Modulite™** telescopica con base tensionabile, consente ad ogni utente di trovare con facilità la propria postura ottimale.



- ① **Schienale tensionabile** con fasce in velcro coperte da imbottitura in Nylon bicolore.
- ② Sistemi di postura per il tronco **Invacare® Matrix®**.
- ③ Lo Schienale **Rea® Flex3** è regolabile, svincolato dalla seduta, sia in altezza sia in larghezza, per un supporto posturale contenitivo e personalizzabile come quello di una carrozzina passiva.

Schienale Abbattibile

Con reclinazione meccanica lo schienale si può sganciare per diminuire l'ingombro. Con reclinazione elettrica, lo schienale si ripiega facilmente per il trasporto, grazie ad un meccanismo di sgancio rapido.



Antiribaltamento a doppio uso

Ruotando di 180° l'antiribaltamento, si crea una pratica base di appoggio per stivare in verticale l'unità motrice della carrozzina.



Telaio completamente smontabile

La batterie si filano, la seduta si toglie completamente senza bisogno di attrezzi.



Bracciolo ribaltabile a compensazione

Sono disponibili due nuovi braccioli ribaltabili per le sedute **Modulite™**, ribaltabile e a compensazione, che facilitano i movimenti e garantiscono un sostegno migliore delle braccia.




Diverse applicazioni

Nel caso di problemi di spazio si può optare per ruote anteriori più strette (200 x 45 mm) anziché le 230 x 60 mm.



Sospensioni a molla

Assicurano un guida confortevole e sicura anche alle alte velocità.

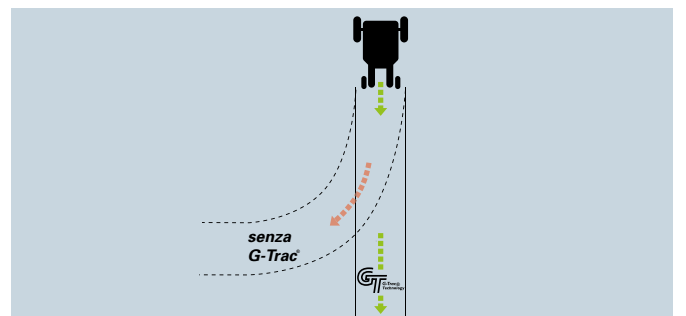

G-Trac (optional)

Sistema giroscopico che corregge automaticamente la traiettoria in presenza di pendenze sul terreno. Ideale anche in caso di comandi alternativi utilizzati in ambiente domestico.

Dati tecnici

Base Fissa	440 - 480 mm ¹	410 / 510 mm	450 mm ³	480 mm	290 - 360 mm	290 - 470 mm ^{3,4}	0° - 20°
Modulite™ Seduta Telescopica	380 - 530 mm ²	410 - 510 mm	450 mm ³ / 450 - 750 mm ^{3,10}	480, 540, 560 mm ^{3,11}	290 - 360 mm	290 - 470 mm ^{3,4}	0° - 20° 0° - 30° ¹⁰


Base Fissa	0° - 30°	590 / 620 mm ⁵	930 mm	1160 mm ⁶ 1210 mm ¹⁰	820 / 840 mm ⁵	98 kg ⁹	130 kg
Modulite™ Seduta Telescopica	0° - 30°	590 / 620 mm ⁵	970 mm	1160 mm ⁶ 1210 mm ¹⁰	820 / 840 mm ⁵	94 kg ⁹	130 kg

ca. 50 Ah	1600 mm 1630 mm ¹⁰	60 mm ⁷	18% (10°)	2 x 250 W	30 km ⁸	6 / 10 km/h	

- 1/** Cuscino sedile da 430 mm
2/ 50 mm in più di larghezza seduta tramite allargamento dei braccioli.
3/ Misura senza cuscino sedile
4/ Alcune misure sono disponibili solo per modelli speciali di portapedana.
5/ La larghezza della base motrice dipende dalla misura delle ruote anteriori.
6/ Compresa le portapedane.
7/ Fino a 100 mm con salicordoli
8/ Secondo ISO 7176-4:2008
9/ Il peso totale dipende dalla configurazione.
10/ Con basculamento COG o con basculamento COG + Lifter.
11/ A seconda dello schienale scelto.

Per ulteriori informazioni sulla destinazione d'uso, le regolazioni ed il trasporto, fare riferimento al manuale d'uso del prodotto. Sul sito internet www.invacare.it sono disponibili altre informazioni propedeutiche alla scelta dell'ausilio.

Colori telaio

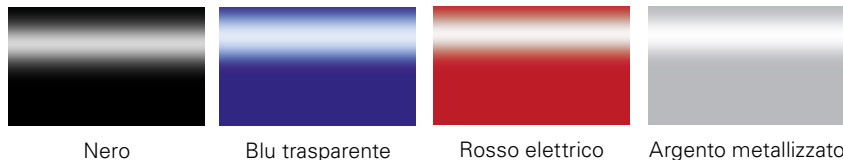

Nero

Blu trasparente

Rosso elettrico

Argento metallizzato

Tipo/Colore fodere


 Nylon/Nero
(Standard)

Dartex/Grigio scuro

Codici NT (configurazione standard):
12.21.27.009 + 12.24.03.163 + /,115 +
12.24.06.163 + /,172 + /,175 + codici ISO
aggiuntivi

Nr. Repertorio DM: 126728/R

CODICI NT SUGGERITI E PURAMENTE INDICATIVI E/O
 RICONDUCEBILI PER OMOGENEITA' FUNZIONALE,
 SOGGETTI AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL MEDICO
 PRESCRIVENTE PRODOTTO COMMERCIALIZZATO

